

ST@N GMAO est une application de GMAO (Gestion de la maintenance Assistée par Ordinateur) dédiée au suivi des équipements biomédicaux pour répondre à l'obligation réglementaire de traçabilité des maintenances sur les dispositifs médicaux, conformément au décret N° 2001-1154 du 5 décembre 2001 relatif à l'obligation de maintenance et au contrôle de qualité des dispositifs médicaux prévus à l'article L. 5212-1 du code de la santé publique. Les fonctionnalités proposées par cette application monoposte sont conformes aux recommandations de la norme NF S99-171 Maintenance des dispositifs médicaux – Modèle et définition pour l'établissement et la gestion du registre sécurité, qualité et maintenance d'un dispositif médical (RSQM).

Développée initialement sous Microsoft Access par l'association « Sis Team Nancy » de la Faculté de médecine de Nancy, dans un objectif pédagogique pour les étudiants du master en Science et Ingénierie de la Santé, elle se destine également aux services biomédicaux ne disposant pas d'un tel outil et souhaitant débiter leur inventaire et la traçabilité de leurs interventions.

Au-delà de l'aspect réglementaire, certaines facilités ont été ajoutées, issues de l'expérience des professionnels intervenants sur la formation. Bien que Sis Team Nancy ait expérimenté d'autres fonctionnalités telles qu'un système expert intégré et un module dédié à la métrologie, il s'agit ici de la version la plus simple et surtout demandant le moins de ressources pour son exploitation.

En contrepartie de la gratuité de la solution, Sis Team Nancy décline toute responsabilité quant aux conséquences potentielles pouvant résulter de l'utilisation de cet outil, et n'apportera aucune personnalisation ni support technique. Si des mises à jour sont par la suite mises à disposition, il appartiendra aux utilisateurs de décider ou non de les installer.

1. Installation

L'application nécessite l'installation d'un dossier « ST@N » complet à copier sous la racine C:\ d'un ordinateur sous Windows 10 ou Windows 11, avec au minimum 4 Go de mémoire vive, et ne disposant pas de Microsoft Access.


L'utilisateur devra au préalable installer le « Microsoft 365 Access Runtime » (gratuit) en version 64 bits depuis le site de Microsoft :

<https://support.microsoft.com/fr-fr/office/t%C3%A9l%C3%A9charger-et-installer-microsoft-365-access-runtime-185c5a32-8ba9-491e-ac76-91cbe3ea09c9>

L'installation de ce Runtime nécessite une connexion internet et peut prendre jusqu'à 30 minutes selon la qualité de la connexion.

Si le dossier « ST@N » a été téléchargé en dossier compressé, il est possible sous Windows 11 que les fichiers décompressés soient bloqués, il suffit alors d'accéder aux propriétés de chaque fichier dans chaque dossier et sous dossier, et cliquer sur la case « Débloquer »

ST@N GMAO étant une application exécutable, tout le dossier C:\ST@N et ses sous dossiers doivent être déclarés en tant qu'emplacement approuvé pour éviter des messages d'avertissements systématiques. Cela nécessite d'accéder à la base de registre (commande « Regedit ») et d'ajouter la clé comme ci-dessous :

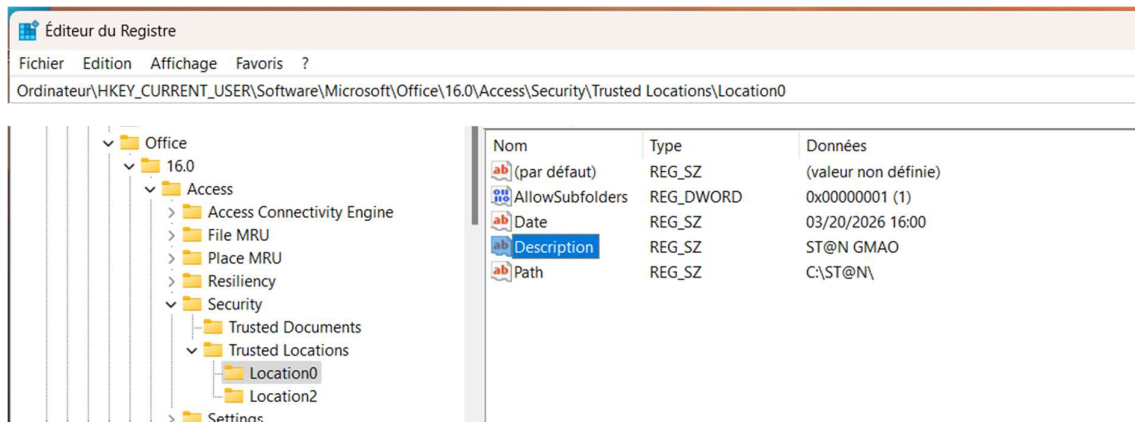


Le dossier ST@N comprend l'application « ST@N_GMAO » (l'utilisateur peut créer un raccourci sur le bureau), et le dossier « Table » où se trouve la base de donnée « ST@N_Tables » et les sauvegardes.

Nom	Modifié le	Type	Taille
Tables	10/04/2026 11:25	Dossier de fichiers	
ST@N_GMAO	09/04/2026 10:25	Microsoft Access ...	10 504 Ko

Nom	Modifié le	Type	Taille
Sauvegardes	10/04/2026 11:25	Dossier de fichiers	
ST@N_Tables	09/04/2026 10:25	Microsoft Access ...	11 656 Ko

En cas de problème avec les données, l'utilisateur peut reprendre une sauvegarde et la recopier à la place de ST@N_Tables, sachant que toute modification effectuée depuis la dernière sauvegarde sera perdue. En cas de problème avec l'application, l'utilisateur peut recopier sous C:\ ST@N\ la version disponible sous C:\ ST@N\Tables\Sauvegardes\Versions\, sans aucun impact sur les données.


A l'ouverture, ST@N demande un mot de passe (indiqué dans le bandeau) avant d'accéder au menu :

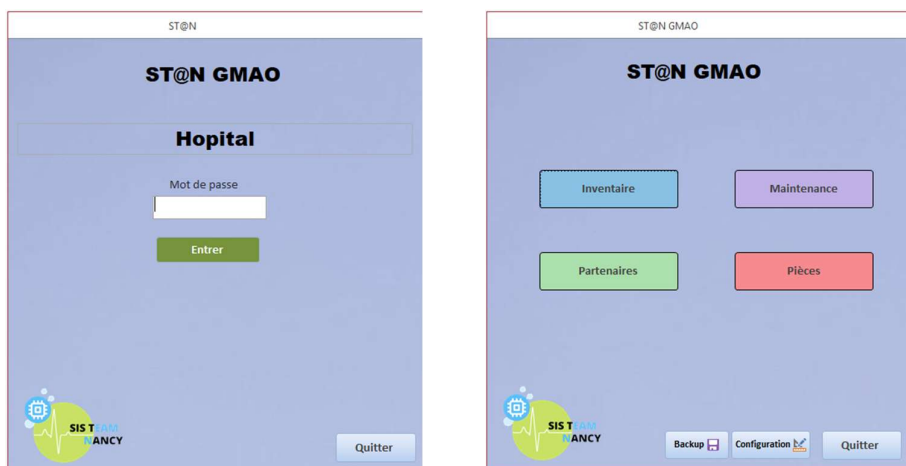

Le bouton « Backup » crée une copie de la base de table dans le dossier C:\ ST@N\Tables\Sauvegardes

Le bouton « Configuration » permet d'accéder aux tables de configuration, pour personnaliser les tables apparaissant avec un « C_ » sur le schéma relationnel disponible au chapitre 7. Le mot de passe

pour accéder à cette section correspond au nom de l'association ayant développé cette application. En exemple ci-dessous la configuration des types de services de l'hôpital :

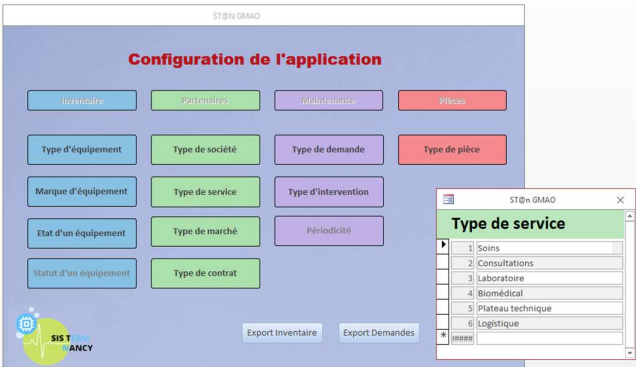

Sur l'exemple « Type de service », comme sur les autres paramètres de configuration, il est possible de changer une dénomination, et supprimer ou ajouter des lignes. Une dénomination modifiée sur une ligne entrainera automatiquement la modification dans l'application. Si une ligne a déjà été utilisée, comme par exemple un équipement associé au service « Laboratoire », la ligne ne pourra être supprimée, mais il reste possible d'en modifier la dénomination.

Les tables « Statut d'un équipement » et « Périodicité » ne sont accessibles qu'en lecture pour ne pas remettre en cause le fonctionnement de l'application. Les boutons d'export créent des fichiers plats de l'inventaire et des demandes d'interventions dans le dossier « Mes documents » en vue d'un passage de ST@N GMAO vers une solution d'éditeur.

2. Gestion des Partenaires

Cette section permet de configurer les sociétés partenaires, et les personnes contact de ces sociétés, ainsi que les éventuels contrats proposés par ces sociétés.



2.1 Sociétés

Liste des pièces référencées :

ST@N - Gestion des partenaires					
Liste des sociétés					
Tout voir	Hôpital			Nouveau	Retour
Société 24	Type	Adresse	Ville	Site Web	Téléphone
Société A	Constructeur	Adresse Société A		SociétéA.fr	
Hôpital	Hôpital	Adresse Hôpital	12345 Ville Pays	sitehopital.com	
Fournisseur 2	Fournisseur	Adresse fournisseur 1		Fournisseur2.com	
Fournisseur 1	Fournisseur	Adresse fournisseur 1		Fournisseur1.com	

La fiche d'information d'une société s'ouvre en cliquant sur son nom (champ en relief). La première société correspond à l'hôpital, son nom apparaît en gras et sa fiche peut être sélectionnée directement en cliquant sur le bouton « Hôpital ». Le formulaire d'une société s'ouvre en cliquant sur le champ en relief de la ligne.

The screenshot shows the 'Fiche Société' form for 'Hopital'. The form has tabs for 'Société', 'Contacts', 'Equipements', and 'Contrats'. The 'Société' tab is active. The form contains the following fields:

- ABV: EP
- Nom: Hopital
- Type: Hôpital
- Adresse1: Adresse Hopital
- Adresse2:
- CP: 12345
- Ville: Ville
- Pays: Pays
- Web: SiteHopital.com
- Tel:
- Email:
- Fax:
- Memo: Site principal
- Emplacements:

Seules les informations du premier onglet « Société » peuvent être saisies, les onglets « Contact », « Equipements » et « Contrats » ne sont qu'en lecture seule pour apporter les informations nécessaires aux collaborateurs biomédicaux.

Le bouton « Emplacement » n'est disponible que sur la fiche société de l'hôpital et permet de définir les services et les localisations, ce qui doit être impérativement réalisé avant de créer les équipements afin de pouvoir affecter correctement la localisation de chaque équipement.

The screenshot shows the 'Liste des services' table. The table has the following columns: Nom, Type, Tel Service, and Tel Responsable. The data is as follows:

Nom	Type	Tel Service	Tel Responsable
Service A	Soins	123	456
Service B	Soins	234	567
Bloc opératoire	Plateau technique	345	678

Il est possible d'associer le plan de chaque service, en veillant toutefois à rester sur une image de faible définition. L'idéal est de coller la capture d'écran d'une image.

The screenshot shows the 'Fiche Service' form for 'Bloc opératoire'. The form has tabs for 'Service', 'Contacts', 'Equipements', and 'Contrats'. The 'Service' tab is active. The form contains the following fields:

- Service: Bloc opératoire
- Tel Service:
- Type: Plateau technique
- Tel Responsable:
- Localisations associées:

Nom du local	Code Local	Service
Bloc 1		Bloc opératoire
Bloc 2		Bloc opératoire
Bloc 3		Bloc opératoire
*		Bloc opératoire
- Enr: M 3 sur 3
- Rechercher
- Plan:

2.2 Contacts

La liste des contacts rassemble les contacts internes de l'hôpital et les contacts externes des sociétés partenaires. La fiche d'information d'un contact s'ouvre en cliquant sur son nom (champ en relief).

ST@N - Gestion des contacts						
Liste des collaborateurs						
Tout voir						Nouveau Retour
Contact	Société	Service	Fonction	Bureau	Mobile	Courrier électronique
TELDIR Eva	Fournisseur 2	Electro chirurgie	Ing Application	02 XX XX XX	07 XX XX XX	
Techniciens Biomed	Hôpital	Biomédical	Tech Biomed			techbio@hopital.fr
OCHEY Eric	Hôpital	Bloc	Cadre de bloc			
NUITOMB Carla	Fournisseur 1	Commercial	Ing. Commercial	01 xx xx xx	06 xx xx xx	c.nuitomb@Fournisseur1.com
MOMAN Justin	Hôpital	Biomédical	Ingé Biomédical			j.moman@hopital.fr
IFFIN Jess	Hôpital	Restauration	Chef Cuisinier			
HAMARAN Kat	Société A	Métrieologie	Contrôleur	03 XX XX XX XX	07 XX XXXX XX	k.hamaran@sociétéA.com

Lors de la création d'un nouveau contact, la case « Actif ? » n'est pas cochée par défaut, il est nécessaire de la cocher si le contact est réellement actif au sein de la société. Un contact peut ainsi changer de société, ou de service, ou juste de n° de téléphone, ou même rester temporairement inactif.

ST@N - Fiche Contact			
Fiche Contact		NUITOMB Carla	
Retour			
Nom	NUITOMB	Société	Fournisseur 1
Prénom	Carla	Service	Commercial
Initiales	CN	Fonction	Ing. Commercial
Tel Fixe	01 xx xx xx	Mail	c.nuitomb@Fournisseur1.com
Tel Portable	06 xx xx xx	Commentaire	N'est plus joignable à partir de 18h00
Fax		Support?	☐
		Actif?	☒

La case « Support ? » doit être cochée si le contact est susceptible d'être intervenant sur une maintenance, ce qui est bien sûr le cas des techniciens et ingénieurs, mais potentiellement aussi pour un ingénieur d'application, voire un ingénieur commercial chargé de configurer un équipement. Les contacts dont la case « Support ? » n'est pas cochée n'apparaîtront pas dans la liste des intervenants techniques lors de la saisie d'une intervention.

2.3 Contrats

Liste de l'ensemble des contrats, la fiche d'information d'une pièce s'ouvre en cliquant sur sa référence interne (champ en relief).

ST@N ECN - Contrats						
Liste des contrats						
Tout voir						Nouveau Retour
Référence	Type	Société	Tarif HT	Date début	Date de fin	Etat
2024_589_HOP	PREVENTIF	Fournisseur 2	562 114,00	01/04/2025	01/04/2026	Actif
ANE CTRL 2026-02	TOTAL	Société A	4 567,00	07/01/2028	07/01/2029	Inactif
PREV HOP 2025	PREVENTIF	Fournisseur 1	2 000,00	09/04/2026	09/04/2027	Actif

La fiche contrat présente trois onglets, l'onglet « Contact » est en lecture seule, et l'onglet « Equipements » sera renseigné une fois que les équipements auront été créés.

Un contrat peut être actifs ou non, afin de préparer un contrat qui pourrait débiter à la fin d'une période de garantie (il faudra alors le passer manuellement en « Actif »).

Les champs tarifaires ne comportent volontairement pas d'information sur la devise, ni de notion de TVA, afin de s'adapter au plus grand nombre de sites. Ce sera au responsable biomédical de décider si les tarifs doivent figurer en hors taxe ou toutes taxes comprise sur l'ensemble de l'application.

Pour les champs de dates, un calendrier apparaît en cliquant sur la case, une saisie manuelle reste possible.

3. Gestion de l'inventaire


Renseigner l'inventaire est la première étape avant d'utiliser une GMAO. Il faudra bien comprendre qu'il n'est pas possible de créer un équipement si son modèle n'a pas été créé préalablement. De même, pour créer un modèle d'équipement, il faut avoir préalablement créé les types d'équipements.

3.1 Gestion des modèles d'équipements

Un même modèle d'équipement peut changer de marque selon les rachats entre fabricants, la liste des modèles propose donc volontairement une sélection par type d'équipement ou directement par modèle. La fiche d'information d'une pièce s'ouvre en cliquant sur le nom du modèle (champ en relief).

ST@N - Modèles				
Liste des modèles				
2 modèles				
Modèle	Type	CNEH	EMDN	UID
Pousse pousse	POUSSE SERINGUE	083530400	Z12030302	(01)09506000117843(11)141231
Din AMAP	MONITEUR MULTIPARAMETRIQUE COMPACT	041512100	Z1203020201	

Sur la fiche modèle, si la marque n'est pas dans la liste, elle peut être créée via les formulaires de configuration, ou directement en cliquant sur le logo à la gauche du champ.

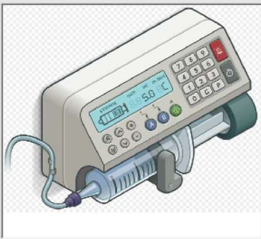ST@N - Fiche Modèle	
Fiche modèle d'équipement	
Pousse pousse	
Retour	
Modèle	
Modèle	Pousse pousse
Marque	 Marque Agcemédical
Type	POUSSE SERINGUE
UID Modèle	(01)09506000117843(11)141231
CNEH 2025	083530400
Famille	08 - PERFUSION
Fonction	353 - PERFUSION AUTONOME
Equipement	04 - POUSSE SERINGUE
Composant	00 - POUSSE SERINGUE
EMDN (CND)	Z12030302
Niveau 1	Z - MEDICAL EQUIPMENT AND RELATED ACCESSORIES AND MATERIALS
Niveau 2	Z12 - FUNCTIONALITY EXPLORING AND TREATMENT INSTRUMENTS
Niveau 3	Z1203 - INSTRUMENTS FOR VITAL SIGNS MONITORING AND LIFE SUPPORT
Niveau 4	Z120303 - INFUSION INSTRUMENTS
Niveau 5	Z12030302 - SYRINGE PUMPS
Niveau 6	Z12030302 - SYRINGE PUMPS
	
Mémo modèle	Tu as trois poussins sur une branche, comment faire pour qu'il n'en reste que deux?
Durée maintenance	45 mn
Exploitation	7 Ans
Données patient	☐
Manuel utilisateur	C:\Doc\MU Poussepousse
Manuel technique	C:\Doc\MT Poussepousse
MO Maintenance	C:\Doc\MO Poussepousse

Les trois champs de documents sont des liens hypertexte permettant d'accéder directement au document.

Le code CNEH correspond à la nomenclature CNEH-AFIB mis à disposition par les Ingénieurs Biomédicaux sur le site de l'AFIB. (Merci !!!). Cette mise à jour inclut désormais les ECME, plus d'excuse pour ne pas planifier les vérifications métrologiques de ces outils. Pour le code EMDN, il est fortement conseillé de commencer la recherche dans la rubrique Z.

Concernant l'image, même remarque que pour les plans, une copie d'écran permettra une ouverture rapide.

3.2 Suivi de l'inventaire

La fiche d'information d'une pièce s'ouvre en cliquant sur son n° d'inventaire (champ en relief).

ST@N - Inventaire						
Liste des équipements						
2 Equipements						
N° inventaire	Statut	Etat	Type	Marque	Modèle	Localisation
HOP2023_0123	AFFECTE	Etat moyen	MONITEUR MULTIPARAMETRIQUE COMPACT	Marque Heure Indélébile	Din AMAP	Bloc opératoire - Bloc A
HOP2023_0123	AFFECTE	Bon état	POUSSE SERINGUE	Marque Agecémédical	Pousse pousse	Service B - Salle de soins

Sur la fiche équipement, seul l'onglet « Administratif » peut être modifié, les autres onglets présentent des informations en consultation pour les collaborateurs biomédicaux.

ST@N - Fiche Inventaire			
Fiche équipement HOP2023_0123 Pousse pousse			
Administratif Maintenances Contrats Contacts Equipements liés			
Code interne: HOP2023_0123 Dénomination: PSE 18 Médecine N° de serie: 5678CD Modèle: Pousse pousse Fournisseur: Fournisseur 1		UID: (01)09506000117843(11)141231(17)201231(10)1234AB(21)5678CD Rattaché à: Marché: PROCEDURE NEGOCIEE N° de Commande: 2023-124578 Tarif: 899,99 Exploitant: Hôpital Référént: Biomed Technicien Mémorisation: Attention, configuration spécifique le la bibliothèque de médicaments pour ce service, penser à la contrôler après une intervention technique	
Etat: Bon état Statut: AFFECTE Localisation: Service B - Salle de soins		08/04/2026 15/04/2026 13/04/2026	
Informations sur le modèle			
Modèle: Pousse pousse Marque: Marque Agecémédical Type: POUSSE SERINGUE UID: (01)09506000117843(11)141231 CNEH: 083530400 EMON: Z12030302		Manuel utilisateur: C:\Doc\MU_Poussepousse Manuel technique: C:\Doc\MT_Poussepousse MO Maintenance: C:\Doc\MO_Poussepousse Classe: 2b Maint: 45 mn Expl: 7 an(s) Données patient? ☐	
Mémorisation: Tu as trois poussoirs sur une branche, comment faire pour qu'il n'en reste que deux?			

ST@N GMAO ne propose pas de système d'affectation automatique de code interne, les cas de figures étant trop variés et spécifiques aux différents hôpitaux. De même, nous ne proposons pas de lecteur de code barre pour le code UID ni de récupération du n° de série, sachant que le GS1 n'est qu'un des quatre formats possibles, et que les structures ne sont pas systématiquement respectées. L'intitulé « UID » est un lien vers le site EUDAMED.


Un équipement peut être rattaché à un équipement principal, comme une source de lumière à un processeur vidéo.

Les boutons à gauche des champs « Modèle » et « Fournisseur » permettent de créer et affecter un nouvel item, qu'il faudra ensuite penser à renseigner. L'état, le statut et la localisation de l'équipement bénéficient d'un historique de suivi, actualisable après chaque inventaire.

ST@N Localisation Equipement		
Localisation	Date	Retour
Service A - Service A - Salle de soin	08/11/2023	
Service B - Service B - Salle de soins	13/04/2026	

Le bouton « Localisation » permet d’afficher le plan du service. Le bas du formulaire reprend les informations sur le modèle, y compris l’image associée en cliquant sur l’appareil photo.

4. Gestion des pièces

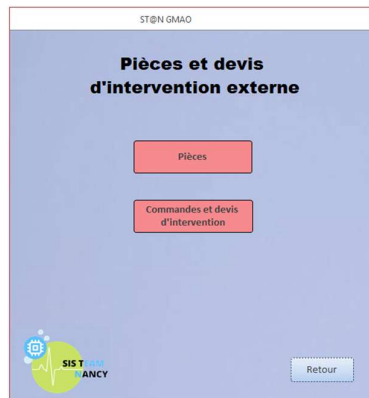

4.1 Pièces

Liste des pièces référencées :

Inventaire des pièces référencées						
Tout voir Nouveau Retour						
Référence	Dénomination	Marque	Fournisseur	Stockage	Quantité	Quantité mini
12-3	Transformateur 12V 3A	Marque Ophlie	Société A	Atelier	6	2
DFL MOT 321	Moteur Pousse seringue	Marque Assain	Fournisseur 2	Atelier	4	3
BRA12	Brassard Taille M	Marque Agecemédical	Fournisseur 1	Armoire consommables	2	5

La fiche d’information d’une pièce s’ouvre en cliquant sur sa référence interne (champ en relief).

Les informations Marque, Fournisseur et Stockage (local ou armoire de stockage) peuvent être directement créées si elles n’apparaissent pas dans la liste. La modification de la quantité en stock, après inventaire des stocks de pièces, nécessite de cliquer sur le bouton « Qté Stock » pour activer le champ et pouvoir le modifier.

ST@N - Fiche Pièce

Fiche de pièces
Moteur Pousse seringue
[Retour](#)

Description
Modèles
Commandes

Dénomination
Moteur Pousse seringue

Tarif
27,30

Marque
Marque Assain

Référence
DFL MOT 32

Fournisseur
Fournisseur 2

Qté Stock
5

Stockage
Atelier

QtéMin
3

Commentaire

L'onglet description permet la saisie des informations et l'onglet « Modèles » permet d'affecter la pièce à un ou plusieurs modèles compatibles ou de supprimer une ligne existante.

ST@N - Fiche Pièce

Fiche de pièces

Moteur Pousse seringue

Retour

Description

Modèles

Commandes

Modèle compatible

Pièce d'origine

Commentaire

Pousse pousse

ST@N - Fiche Pièce

Fiche de pièces

Moteur Pousse seringue

Retour

Description

Modèles

Commandes

Fournisseur

Fiche

Etat

Ref Fournisseur

Tarif

Quan

Reçu

Société A

13/04/2026

En attente

DFL MOT 321

18,50

5

0

L'onglet « Commande » est en consultation uniquement pour revoir les commandes dont au moins une ligne de commande concerne cette pièce référencée.

4.2 Commandes et devis d'intervention

Les commandes concernent les pièces référencées, ainsi que des pièces non référencées et devis.

ST@N - Pièces

Tout voir

Liste des commandes

Nouveau

Retour

Référence

Fournisseur

Date

Etat

CMD2604-1

HOP202654785

Fournisseur 2

13/04/2026

En attente

CMD2604-2

SA125623

Fournisseur 1

13/04/2026

En attente

En cliquant sur une référence de commande (bouton en relief) le bon de commande s'ouvre avec les lignes de commandes des pièces référencées sur le premier sous formulaire, et les pièces non référencées sur le second sous formulaire.

ST@N - Fiche Pièce

Bon de commande

CMD2604-2

Impression

Retour

Fournisseur

Commande

Fournisseur 1

SA125623

Date

Commentaire

13/04/2026

Vu dictement avec le commercial suite mail du 03/34/2026

Etat

En attente

Articles stockés

Désignation

Référence

Tarif

Qté

Reçu

Commentaire

Moteur Pousse seringue

DFL MOT 321

18,50

5

0

Tarif négocié

Transformateur 12V 3A

TR12

23,00

1

0

*

1

0

Articles et prestations non suivis

Article ou devis

Référence

Tarif

Qté

Reçu

Commentaire

Preventive sur site avec déplacement

PREV20260402

120,00

1

0

Prévue le 10/04/2026

Capot pousse seringue

CP2789

74,68

1

0

*

1

0

Le passage à l'état « Reçu » met à jour les champs « Reçu » des lignes de commandes, et la quantité en stock pour les pièces référencées. En cas de réception partielle, la quantité effectivement reçue peut-être saisie manuellement sur chaque ligne de commande, pour les pièces référencées la quantité en stock sera également mise à jour.

Le bon de commande peut être imprimé (pdf ou imprimante locale) avec le bouton « Impression ».



Bon de commande

CMD2604-2

Date: **13/04/2026** Fournisseur: **Fournisseur 1**

Objet de l'intervention: **SA125623**

Commentaires: **Vu dictement avec le commercial suite mail du 03/34/2026**

Désignation	Référence	Unitaire	Qté	Total	Remarque
Moteur Pousse seringue	DFL MOT 321	18,50	5	92,50	Tarif négocié
Preventive sur site avec déplacement	PREV20260402	120,00	1	120,00	Prévue le 10/04/2026
Transformateur 12V 3A	TR12	23,00	1	23,00	
Capot pousse seringue	CP2789	74,68	1	74,68	

5. Gestion des interventions

ST@N GMAO sépare volontairement les demandes planifiées des demandes en cours pour ne pas surcharger le technicien

ST@N GMAO

Maintenances et contrôles

Demandes d'intervention

Maintenances périodiques

Planification



Retour

5.1 Planification des actions périodiques

ST@N - Planification des demandes périodiques

Planification des actions périodiques

Tout voir
Ajouter Générer Retour

Référence	Type d'équipement	Modèle	N° Inventaire	Type d'action	Periodicité	Titre	Service	Actif ?
P26042	POUSSE SERINGUE	Pousse pousse	HOP2023_0123	Contrôle	Mensuel	Contrôle mensuel des pousse seringue	Service B	Actif
P26042	POUSSE SERINGUE	Pousse pousse	HOP2023_0123	Préventive	Annuelle	Maintenance préventive annuelle poussi	Service B	Actif
P26043	MONITEUR MULTIPARAMETRIQ	Din AMAP	HOP2026_AAD1	Préventive	Triennale	Préventive 3 ans	Bloc opératoire	Actif

Il ne s'agit pas ici de la liste des maintenances préventives internes à réaliser ou externes à suivre, mais de caractériser une action périodique, qui sera déclinée en une ou plusieurs demandes sur l'année selon la périodicité définie sur la fiche de planification.

ST@N - Fiche Planification

Planification

P26042

Retour

Equipement: HOP2023_0123 POUSSE SERINGUE Pousse pousse / Service B Service B - Salle de so

Titre: Maintenance préventive annuelle pousse seringue

Type: Préventive Periode: Annuelle

Memo: Préventive selon mode opératoire MO_XXXXX

Début: 11/07/2024

Fin:

Société: Hôpital

Actif?: ☒

Après retour sur la liste, le bouton « Générer » va créer toutes les demandes correspondantes sur l'année en cours. Il faut cliquer sur ce bouton à chaque création d'une action planifiée, et à chaque début d'année.

5.2 Maintenances périodiques

La liste des demandes périodiques générées sur l'année est accessible via ce menu

ST@N - Demandes périodiques

Tout voir

Retour

Liste des actions périodiques à réaliser

Référence	Type d'équipement	Modèle	N° Inventaire	Type d'action	Periodicité	Titre	Service
P26043_2026/1	MONITEUR MULTIPARAMETRIQUE C	Din AMAP	HOP2026_AA	Préventive	Trimestrielle	Préventive 3 ans	Bloc opératoire
P26042_2026/1	POUSSE SERINGUE	Pousse pousse	HOP2023_01	Préventive	Annuelle	Maintenance préventive annuelle pousse	Service B
P26041_2026/1	POUSSE SERINGUE	Pousse pousse	HOP2023_01	Contrôle	Mensuel	Contrôle mensuel des pousse seringue	Service B
P26041_2026/2	POUSSE SERINGUE	Pousse pousse	HOP2023_01	Contrôle	Mensuel	Contrôle mensuel des pousse seringue	Service B
P26041_2026/3	POUSSE SERINGUE	Pousse pousse	HOP2023_01	Contrôle	Mensuel	Contrôle mensuel des pousse seringue	Service B
P26041_2026/4	POUSSE SERINGUE	Pousse pousse	HOP2023_01	Contrôle	Mensuel	Contrôle mensuel des pousse seringue	Service B
P26041_2026/5	POUSSE SERINGUE	Pousse pousse	HOP2023_01	Contrôle	Mensuel	Contrôle mensuel des pousse seringue	Service B
P26041_2026/6	POUSSE SERINGUE	Pousse pousse	HOP2023_01	Contrôle	Mensuel	Contrôle mensuel des pousse seringue	Service B
P26041_2026/7	POUSSE SERINGUE	Pousse pousse	HOP2023_01	Contrôle	Mensuel	Contrôle mensuel des pousse seringue	Service B
P26041_2026/8	POUSSE SERINGUE	Pousse pousse	HOP2023_01	Contrôle	Mensuel	Contrôle mensuel des pousse seringue	Service B
P26041_2026/9	POUSSE SERINGUE	Pousse pousse	HOP2023_01	Contrôle	Mensuel	Contrôle mensuel des pousse seringue	Service B
P26041_2026/10	POUSSE SERINGUE	Pousse pousse	HOP2023_01	Contrôle	Mensuel	Contrôle mensuel des pousse seringue	Service B
P26041_2026/11	POUSSE SERINGUE	Pousse pousse	HOP2023_01	Contrôle	Mensuel	Contrôle mensuel des pousse seringue	Service B
P26041_2026/12	POUSSE SERINGUE	Pousse pousse	HOP2023_01	Contrôle	Mensuel	Contrôle mensuel des pousse seringue	Service B

En cliquant sur la référence d'une demande planifiée (en relief), le technicien peut ainsi la transférer au moment voulu vers la liste des demandes en cours.

ST@N - Fiche Planification

Demande Planifiée

P26042_2026/1

Retour

Equipement

HOP2023_0123 POUSSE SERINGUE Pousse pousse / Service B Service B

Titre

Maintenance préventive annuelle pousse seringue

Type

Préventive

Par: Fournisseur 1

Memo

Préventive selon mode opératoire MO_XXXXX

Transférer vers les demandes

5.3 Demandes d'intervention

ST@N - Demandes

Tout voir

Ajouter

Retour

Liste des demandes d'intervention

Demande	Equipement	Modèle	Service	Type de demande	Anomalie	Initial	Final	Etat de la demande
S2604000003	HOP2026_AA01	Din AMAP	Bloc opératoire	Curative	Brassard HS	10/04/2026		En attente
P26042_2026/1	HOP2023_0123	Pousse pousse	Service B	Préventive	Maintenance préventive annuelle pousse seringue			En attente
S2604000001	HOP2023_0123	Pousse pousse	Service B	Curative	Ne pousse plus	14/04/2026		En attente

On accède à la fiche de la demande en cliquant sur sa référence (champ en relief). ST@N GMAO ne gère volontairement pas automatiquement les états « En attente », « En cours » et « Clôturée », laissant chaque service biomédical gérer ces notions selon ses propres pratiques.

ST@N - Fiche Maintenance

Demande

Pousse pousse HOP2023_0123

P26042_2026/1

Demande Intervention Pièces Devis

Equipement: HOP2023_0123 - Pousse pousse Service B - Salle de soins
 Etat de la demande: En attente
 Type de demande: Préventive
 Initial: 14/04/2026
 Responsable: MOMAN Justin
 Final:
 Défaut: Maintenance préventive annuelle pousse seringue
 Memo: Préventive selon mode opératoire MO_XXXXX

Dans la liste des responsables n'apparaissent que des personnels de l'hôpital. Une fois l'équipement identifié avec son défaut, il est envisageable de cliquer sur l'imprimante pour éditer le rapport d'intervention vierge et le scotcher sur l'appareil pour éviter qu'il soit repris par un personnel pensant que l'intervention est terminée. Il peut également être décidé de saisir manuellement les actions réalisées au fil de l'eau, et ne réaliser la saisie qu'une fois l'appareil prêt à être remis en service.

L'onglet « Intervention » permet de saisir les différentes prises en charges :

ST@N - Fiche Maintenance

Demande

Pousse pousse HOP2023_0123

P26042_2026/1

Demande Intervention Pièces Devis

Ajouter

Intervention	Demandeur	Société	Type d'intervention	Action réalisée	Etat initial	Final	Durée (mn)
INT2604000001	NUITOMB	Fournisseur 1	Préventive	Réalisation de la maintenance préventive selon protoc	14/04/2026	14/04/2026	60
INT2604000004	Technicien	Hôpital	Formation interne	Lors de la remise en service, rappel aux utilisateurs de	15/04/2026	15/04/2026	10
INT2604000005	NUITOMB	Fournisseur 1	Préventive	En amont des contrôles, remplacement préventif du mo	14/04/2026	14/04/2026	45

Cliquer sur « Ajouter » pour renseigner une prise en charge, ou cliquer sur la référence (en relief) pour revoir une prise en charge déjà saisie.

ST@N - Fiche Maintenance

Fiche d'intervention

INT2604000005

Retour

Intervention

Société: Hôpital
 Type: Préventive
 Début: 14/04/2026
 Intervenant: Fournisseur 1 - Carla NUITOMB
 Temps passé (mn): 45
 Fin: 14/04/2026
 Action: En amont des contrôles, remplacement préventif du moteur (plan de maintenance 3 ans). Pris sur stock de l'hôpital

ST@N - Fiche Maintenance

Fiche d'intervention

INT2604000001

Intervention

Société: Type: Début:

Intervenant: Temps passé (mn): Fin:

Action:

ST@N - Fiche Maintenance

Fiche d'intervention

INT2604000003

Intervention

Société: Type: Début:

Intervenant: Temps passé (mn): Fin:

Action:

L'onglet « Pièces » permet de déclarer les pièces consommées :

ST@N - Fiche Maintenance

Demande

S2604000001

Pousse pousse HOP2023_0123

Demande Intervention Pièces Devis

Référence	QTE
Moteur Pousse seringue DFL MOT 321	1
	0

La quantité en stock sera mise à jour en fonction de la quantité consommée. Si la pièce référencée n'apparaît pas dans la liste, il est probable qu'elle n'a pas été associée au modèle (Voir en 4.1).

L'onglet « Devis » sert à déclarer la consommation des pièces non référencées

ST@N - Fiche Maintenance

Demande

P26042_2026/1

Pousse pousse HOP2023_0123

Demande Intervention Pièces Devis

Référence	QTE	Désignation
	1	
Fournisseur 1 (CMD2604-2 13/04/2026) CP2789 - Capot pousse seringue		
Fournisseur 2 (CMD2604-1 13/04/2026) - Devis n°123654 Intervention sur site		
Fournisseur 1 (CMD2604-2 13/04/2026) PREV20260402 - Preventive sur site avec déplacement		

Dès qu'une pièce non référencée ou un devis sont sélectionnés, l'application ouvre la liste des commandes afin que l'opérateur mette à jour manuellement la quantité reçue, et que la référence n'apparaisse plus dès lors que la quantité reçue est égale à la quantité commandée.

Articles et prestations non suivis					
Article ou devis	Référence	Tarif	Quantité	Reçu	Commentaire
Preventive sur site avec déplacement	PREV20260402	120,00	1	1	Prévue le 10/04/2026
Capot pousse seringue	CP2789	74,68	1	0	
			1	0	

Une fois toutes les prises en charges saisies, la demande peut être passée en état « Clôturée », et imprimée via le logo de l'imprimante.



Rapport d'intervention **POUSSE SERINGUE Pousse pousse HOP2023_0123**

Prise en charge: 14/04/2026

Marque: POUSSE SERINGUE

Fin d'intervention:

Modele: Pousse pousse

Etat: Clôturée

Objet de l'intervention: Maintenance préventive annuelle pousse seringue

Actions réalisées

Société	Intervenant	Type d'intervention	Action réalisée	Début	Fin	Durée
Fournisseur 1	NUITOMB	Préventive	Réalisation de la maintenance préventive selon protocole XX-XXX	14/04/2026	14/04/2026	60
Hôpital	Technicien	Formation interne	Lors de la remise en service, rappel aux utilisateurs de la nécessité de laisser l'appar	15/04/2026	15/04/2026	10
Fournisseur 1	NUITOMB	Préventive	En amont des contrôles, remplacement préventif du moteur (plan de maintenance	14/04/2026	14/04/2026	45

Pièces référencées

Société	Référence	Dénomination	Qté	PJ	PTot
Marque Assain	DPL MDT 321	Moteur Pousse seringue	1	27,30	27,30

Pièces et devis non référencés

Société	Référence	Dénomination	Qté	PJ	PTot
Fournisseur 1	Preventive sur site	Fournisseur 1 (13/04/2026) PREV20260402 - Preventive sur site avec déplacement 120 ETC	1	120,00	120,00

L'intervention apparaîtra également dans l'onglet « Maintenances » de l'équipement, permettant de revoir la demande et le détail des opérations réalisées.

ST@N - Fiche Inventaire

Fiche équipement

HOP2023_0123 Pousse pousse

Retour

Administratif

Maintenances

Contrats

Contacts

Equipements liés

Ref	Type	Etat	Initial	Final	Début	Memo
S2604000001	Curative	En attente	14/04/2026		Ne pousse plus	
P26042_2026	Préventive	Clôturée	14/04/2026		Maintenance préventive annuelle pousse seringue	Préventive selon mode opératoire MO_XXXXX

Tout voir

Liste des interventions sur cet équipement

Retour

Intervention	Demandeur	Société	Type d'intervention	Action réalisée	Etat initial	Final	Durée
INT2604000001	NUITOMB	Fournisseur 1	Préventive	Réalisation de la maintenance préventive selon protoc	14/04/2026	14/04/2026	60
INT2604000004	Technicien	Hôpital	Formation interne	Lors de la remise en service, rappel aux utilisateurs de	15/04/2026	15/04/2026	10
INT2604000005	NUITOMB	Fournisseur 1	Préventive	En amont des contrôles, remplacement préventif du mo	14/04/2026	14/04/2026	45

ST@N - Fiche Maintenance

Fiche d'intervention

INT2604000001

Retour

Société

Hôpital

Initial

14/04/2026

Demandeur

Carla NUITOMB

Final

14/04/2026

Type

Préventive

Temps passé


60

Action


Réalisation de la maintenance préventive selon protocole XX-XXX

6. Utilitaires

Conçu initialement par et pour des étudiants en ingénierie biomédicale, ST@N GMAO souhaite maintenir sa démarche pédagogique. En cliquant sur le logo de la page d'accueil, l'utilisateur accède au schéma relationnel de la base, et une vue du contenu des tables (bouton loupe).

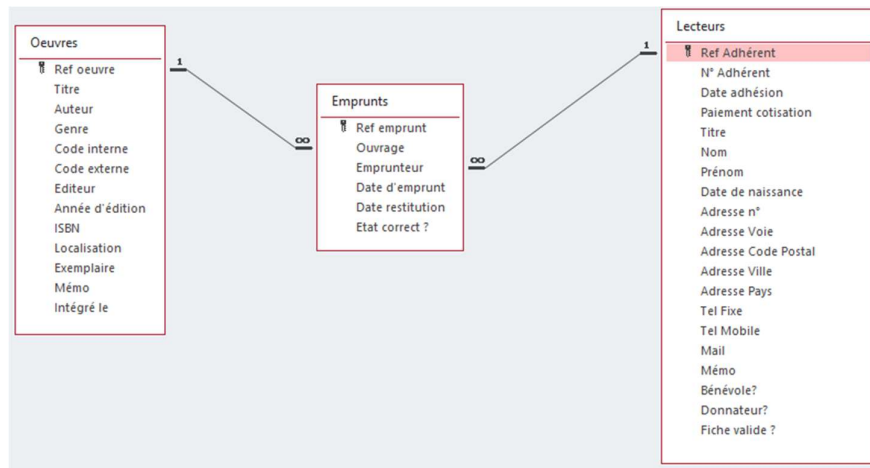

Pour les demandes d'interventions le principe est exactement le même afin d'associer un équipement et un responsable interne de suivi de l'intervention

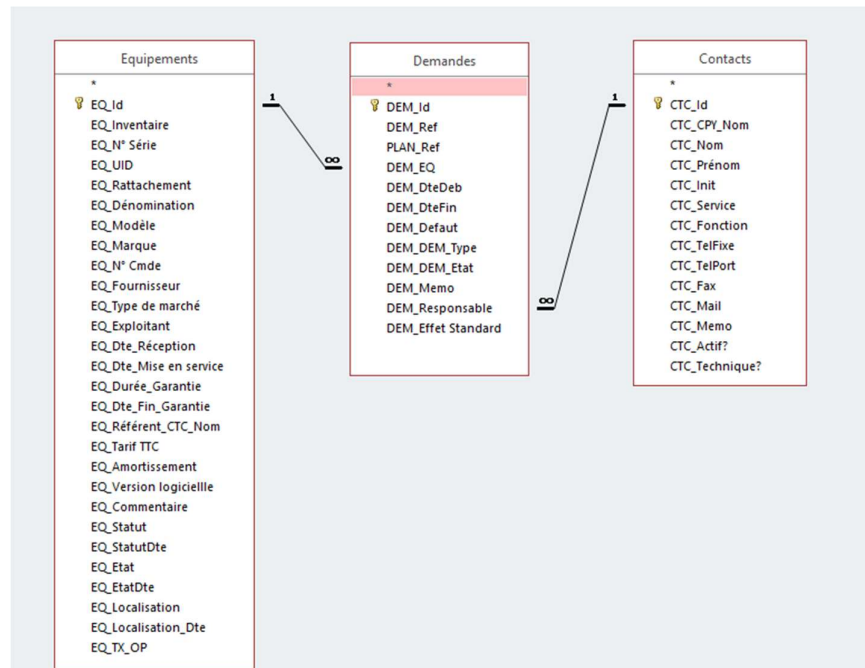

A noter, certains champs prévus dans les tables ne seront exploités que dans des versions futures comme le champ « DEM_Effet Standard » de la table « Demande » destiné à indiquer un code erreur ou un défaut récurrent pour alimenter un système expert simplifié alimenté par les saisies d'intervention des techniciens.